



[Fiche technique]

Sac vomitoire DMT Vom

Réf. 292105

Le DMT VOM permet une utilisation simple en cas de nausées et incontinence urinaire.
Il peut être utilisé dans de nombreuses applications de la vie courante.
Utile et pratique, il peut se glisser dans un sac, dans la voiture...
Sac gradué tous les 100 ml avec collerette de type "entonnoir".

Informations complémentaires

Épaisseur du matériau : ≤ 1 mm.

Système de fermeture : entonnoir et valve anti-retour se referment automatiquement après utilisation pour éviter un renversement qui le rend totalement étanche après usage.


Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxl) 15.5 x 36 cm
Couleur	Transparent
Utilisation	Usage unique
Volume	1000 ml - Gradués tous les 100 ml
Matière	Sac en polyéthylène - Collerette en carton résistant - sans latex
Unité de vente	A l'unité
Poids	20 g l'unité
Instructions d'utilisation	Déplier le sac et le maintenir le cône en hauteur. Pousser les extrémités du cône vers le centre pour former un entonnoir. Evacuer vomissement ou urine du cône dans le sac. L'entonnoir et la valve anti-retour se referment automatiquement après utilisation pour éviter tous risques de renversements.
Classification	Dispositif médical de Classe 1

Photos



Sac vomitoire gradué 1000ml
avec valve anti-retour - la pièce

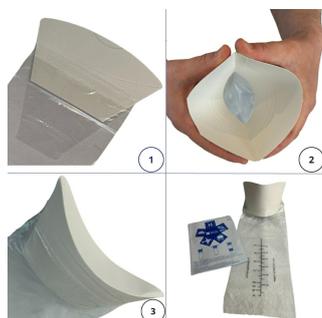

Sac vomitoire gradué 1000ml
avec valve anti-retour - la pièce



Sac vomitoire gradué 1000ml
avec valve anti-retour - la pièce